



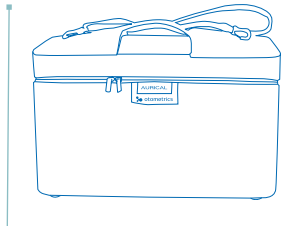

El camino a la excelencia
en la adaptación


La cámara anecoica

Mínimo tamaño. Máximo beneficio.

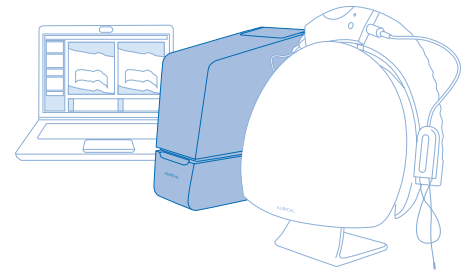

Portátil: El diseño compacto le permite llevarlo a sus visitas domiciliarias o trasladarlo entre oficinas con facilidad.

Único: Combina unas dimensiones reducidas con un completo juego de prestaciones y gran facilidad de uso para la adaptación mediante acoplador usando RECD y realizando mediciones personalizadas.

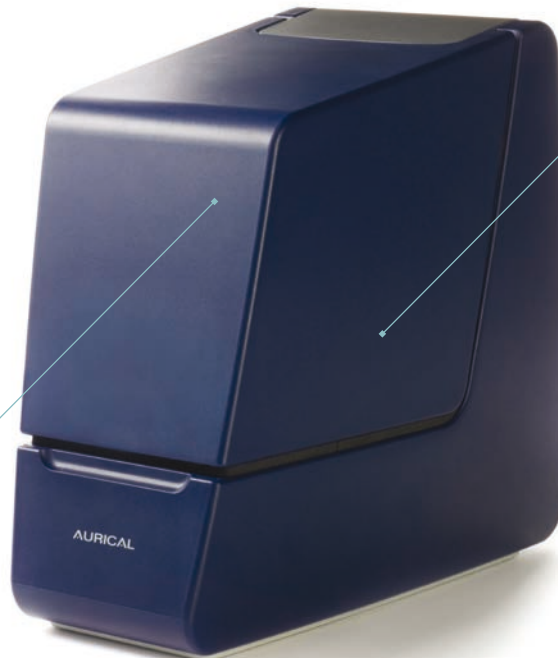

Los audífonos se colocan fácilmente de forma correcta para realizar mediciones precisas y fiables. El método **OnePosition** sirve para todas las mediciones.



Aurical HIT ofrece un nuevo enfoque de las pruebas de audífonos. El diseño vertical combina unas dimensiones reducidas con un completo juego de prestaciones y gran portabilidad. Aurical HIT permite realizar una intuitiva adaptación mediante acoplador con RECD, programación previa y adaptación previa sin la presencia del cliente. Funciona independientemente de los otros elementos Aurical. También puede conectarlo al audiómetro Aurical Aud o, directamente al ordenador donde se ejecuta Otosuite® – la interfaz compartido para los elementos de Aurical.

Aurical HIT le proporciona una flexibilidad excepcional para que usted pueda atender a su cliente a su manera. Realizar mediciones según los estándares IEC y ANSI o llevar a cabo la medición por FreeStyle. Personalizar el estímulo y los métodos prescriptivos a su necesidad. Con la Configuración Personalizada de Otosuite podrá realizar secuencias parciales o completas para mayor consistencia y eficacia en su análisis.

Aurical HIT le dará la verdadera imagen de la prótesis auditiva, sea cual sea el fabricante o la clase. Más aún; el diseño flexible de la medición le hace apropiado para la verificación de las prestaciones inalámbricas.

LOS HECHOS

- Adaptación basada en acoplador utilizando RECD conforme a DSL v5.0b y NAL NL2
- Para clientes pediátricos y adultos
- Pruebas de audífonos conformes a los estándares IEC y ANSI
- Verificación de la tecnología inalámbrica
- Pruebas de direccionalidad
- Estímulos de 2 canales en PMM FreeStyle
- Estímulo y objetivo personalizado
- Interfaz Otosuite
- Alimentado por USB
- OnePosition
- Acopladores de presión
- Autodetección de baterías de reemplazo
- Bucles de inducción integrados

El exclusivo concepto OnePosition


Utilización sencilla. Alta calidad consistente.



Las pruebas de audífonos solían ser un engorro, con un proceso de trabajo discontinuo. Por eso hemos creado el concepto **OnePosition**.

OnePosition es un método exclusivo que combina la facilidad de uso con la precisión y la calidad. En resumen, OnePosition permite colocar el audífono de forma rápida y sencilla en una posición segura en la cámara de prueba y evita tener que recolocar para las mediciones de direccionalidad o bobina de inducción. Esto se aplica a todos los formatos de audífonos, incluidas las soluciones FM. El diseño de Aurical HIT se basa en lograr que cada uno de los pasos tradicionales en la adaptación mediante acoplador o los análisis del audífono sea eliminado o, como mínimo, resulte más fácil.


Aquí tiene algunos ejemplos: la caja de accesorios sirve como soporte para los adaptadores de acoplador, lo que le ayuda a

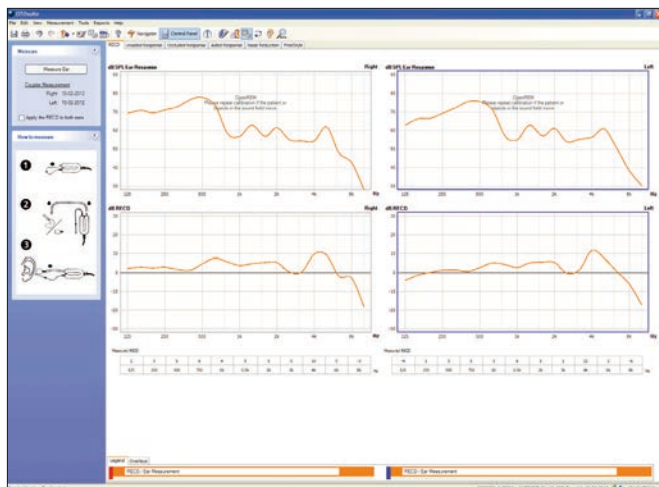

Funcionamiento RECD intuitivo en Otosuite.

fijar el audífono al adaptador. Este adaptador se fija fácilmente al micrófono y acoplador integrado que se conecta sin esfuerzo a una ranura designada que garantiza una correcta altura del audífono para cualquier medición. El micrófono de referencia de cuello flexible se coloca con facilidad y se mantiene en su sitio con seguridad. Los cables son prácticamente eliminados, al igual que los acopladores que giran en la base de la cámara anecoica. Los bucles de inducción incorporados ofrecen un campo magnético muy consistente, de modo que no es necesario reorientar el audífono para encontrar el punto óptimo antes de realizar la medición.

Esto es OnePosition: la calidad nunca ha sido tan fácil. Aurical HIT se ha creado para que se adapte a su forma de trabajar y no al revés.

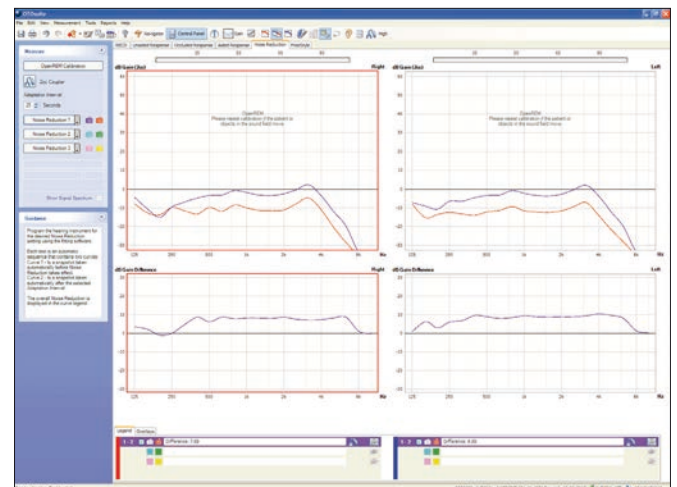

Demostración de prestaciones avanzadas de audífonos.

Vea el vídeo sobre el exclusivo concepto OnePosition en hearing-balance.natus.com/aurical

La familia Aurical

Integración total con Otosuite



El software Otosuite® integra todos los elementos del Aurical®. Es intuitivo, fácil de aprender y de utilizar. Ayuda al cliente durante todo el proceso, desde el diagnóstico y el asesoramiento hasta la adaptación y verificación. La intuitiva funcionalidad de medición del usuario asegura flujos de trabajo fluidos, uniformes y configurables que pueden ser personalizados para adaptarse a necesidades individuales. Y usted trabajará con un único entorno de software en todos los módulos. El resultado es una experiencia de adaptación mejorada, tanto para usted como para su cliente.

Puede ver vídeos sobre la solución de adaptación completa en hearing-balance.natus.com/aurical

Acerca de Natus

Otometrics, una empresa líder en productos y soluciones para la audición y el equilibrio, fue adquirida en el año 2017 y en la actualidad tiene el nombre de Natus. Llevamos casi 60 años ayudando a los profesionales de la salud a mejorar la calidad de vida de los pacientes gracias al conocimiento de nuestros expertos, servicios y soluciones fiables y la confianza de nuestros socios de negocio. Seguimos desarrollando, fabricando y comercializando instrumentos audiológicos, otoneurológicos y vestibulares en más de 80 países con nombres de marcas que son sinónimos de confianza, como Madsen®, Aurical®, ICS®, Otoscan® y Bio-logic®. Natus Medical Incorporated es la marca en la que confían profesionales del sector de la medicina de todo el mundo para diagnosticar y tratar trastornos del sistema nervioso central y sistemas sensoriales con el fin de mejorar los resultados en los pacientes. Si desea más información, visite natus.com.

Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.

©2021 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 7-26-8091-ES Rev03

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com