





Käytetyt turvallisuussymbolit:

Symboli	Merkitys
	Katso mukana toimitettuja oppaita
	Kertakäyttöinen, älä käytä uudelleen
	Eräkoodi
	Viimeinen käyttöpäivä


Lyhytaikaiseen käyttöön sairaalassa keskosten kanssa ainoastaan valvotuissa oloissa. Vain Rx.

KÄYTTÖOHJE:

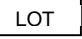Tärkeää! Noudata sairaalan antamia hygienia- ja ihonhoito-ohjeita puhdistaessasi ihoa. Käytä keskosen iholla hydrogeeliä ja noudata oikeaa käyttöaikaa ja hävittämistapaa.


1. Irrota MiniMuffs-kuulosuojaimet alustastaan ja aseta ne lapsen korvien ympärille yksi kerrallaan. Aseta jompaankumpaan asentoon:




 **Varoitus!** Aseta kuulosuojaimet siten, että korvalehdet eivät jää puristuksiin. Älä pakota suuria korvia suojaimiin. Älä aseta ärtyneen ihon päälle.

2. Paina kuulosuojaimet varovasti paikoilleen ja varmista, että ne ovat tiiviisti korvien ympärillä. Vältä suojaimien asettamista hiusten päälle. Älä paina suojainta keskeltä.

Tärkeää! Äänenvaimennus on riippuvainen siitä, kuinka tiiviisti suojaimet ovat paikoillaan. Tarkasta, että suojaimet ovat tiiviisti paikoillaan, siirreltyäsi lasta.

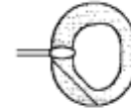



3. Välttääksesi kuulosuojaimen liiallisen kiinnittymisen herkkään ihoon voit vähentää hydrogeeliä pyyhkimällä sitä pois pumpulilla tai sideharsolla ennen suojainten asentamista.

 **Varoitus!** Tarkkaile lapsen ihoa sairaalan antamien ohjeiden mukaan. Lopeta suojainten käyttö, jos iho ärtyy tai ilmenee turvotusta.

4. Irrota suojaimet varovasti. Kostuta hydrogeeliä määrällä pumpulilla tai sideharsolla suojaimien reunan alta ja etene hitaasti. Tue ihoa ja nosta kuulosuojainta varovasti reunasta.



Kuulosuojaimet ovat kertakäyttöisiä. Hävitä ne sairaalan antamien ohjeiden mukaisesti.

 <p>Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA • Yhdysvallat +1 650-802-0400 • www.natus.com</p>	<p>CE REP Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Saksa</p>	
---	--	--