

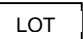



Símbolos de segurança utilizados:


Symbol	Significado
	Consultar a documentação anexa
	Não reutilizar, para utilização num único doente
	Código de lote/número de lote
	Prazo de validade/Usar até

Para utilização hospitalar a curto prazo em crianças pré-termo, apenas em ambientes com supervisão. Produto sujeito a prescrição médica.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Importante! Observe os protocolos de gestão de cuidados cutâneos e de controlo de infecções do hospital no que se refere à limpeza da pele, utilizando um adesivo de hidrogel na pele do prematuro e respeitando a duração de utilização e eliminação adequadas.


1. Retire os protectores para os ouvidos MiniMuffs da embalagem e aplique no prematuro, um de cada vez.

 **Aviso!** A redução do ruído depende de uma boa vedação dos protectores. Observe a vedação dos protectores ao reposicionar a criança.

2. Pressione ligeiramente os bordos dos protectores para assegurar uma boa vedação. Evite colocar os protectores sobre o cabelo. Não pressione a parte central dos protectores.


Importante! A redução do ruído depende de uma boa vedação dos protectores. Observe a vedação dos protectores ao reposicionar a criança.

3. Para reduzir a adesão do hidrogel na pele sensível do bebé, passe uma cotonete ou compressa de gaze limpa na superfície do hidrogel antes de aplicar os protectores na criança.

 **Aviso!** Observe a pele de acordo com o protocolo de gestão dos cuidados cutâneos do hospital. Suspenda a utilização na presença de irritação, abrasão ou edema.

4. Tenha cuidado ao retirar os protectores de ouvidos. Humedeça uma cotonete ou compressa de gaze e passe suavemente sob os protectores para humedecer o hidrogel. Apoiando a pele, levante cuidadosamente os protectores pelos bordos.

Elimine correctamente os protectores de ouvidos para uma única utilização.

 <p>Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA • EUA +1 650-802-0400 • www.natus.com</p>	<p>EC REP Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Alemanha</p>
---	---

