





Sikkerhetssymboler:

Symbol	Betydning
	Se medfølgende dokumentasjon
	Skal ikke gjenbrukes, bare til engangsbruk
	Partikode / lot-nummer
	Utløpsdato / holdbarhetsdato


For kortidsbruk på sykehus på premature spedbarn i et kontrollert miljø. Bare Rx.

BRUKSANVISNING:

Viktig! Følg sykehusets protokoller/rutiner for infeksjonskontroll og hudbehandling for rensing av hud, bruk av hydrogelklebestoff på prematur hud, hvor lenge produktet kan brukes og avfallshåndtering.

1. Fjern MiniMuffs-øremuffer fra underlaget og plasser dem på spedbarnet, en om gangen. Kan settes på hvilken som helst vei:





 **Advarsel!** Påse at øret ikke brettes eller foldes. Press ikke for store ører inn i øremuffen. Bruk ikke øremuffen på sår hud.

2. Trykk kantene på øremuffen forsiktig, men bestemt, på plass for å sikre god tetning. Unngå å sette øremuffene på hår. Trykk ikke mot øremuffens forhøyde midtpunkt.

Viktig! Støyreduksjon er avhengig av god tetning. Undersøk tetningen hvis spedbarnet endrer stilling.

3. For å begrense klebing av hydrogel på følsom hud, tørk lett over hydrogel overflaten med en ren vattpinne eller kompress før muffen settes på spedbarnet.

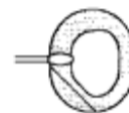



 **Advarsel!** Undersøk pasientens hud i henhold til sykehusets rutiner. Slutt å bruke produktet hvis huden viser tegn til irritasjon, oppskraping eller er ødematøs.

4. Vær forsiktig når øremuffene fjernes. Fukt en vattpinne eller kompress, smør forsiktig under kanten av øremuffene for å løsne hydrogel. Støtt den underliggende huden, og løft øremuffen forsiktig etter kanten.



Kasser engangsøremuffer på forskriftsmessig måte.

 Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA +1 650-802-0400 • www.natus.com	 Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Tyskland
---	---

