

## Zastosowane symbole bezpieczeństwa:

### Symbol

### Znaczenie



Przeczytać załączoną dokumentację



Nie używać ponownie, do użytku tylko dla jednego pacjenta



Kod partii / numer serii



Data przydatności / Zużyć przed

**Do użycia podczas krótkotrwałej hospitalizacji, u wcześniaków przebywających tylko w środowisku monitorowanym.**

### INSTRUKCJA OBSŁUGI:

**Ważne!** Stosując lepki hydrożel na skórze wcześniaka, należy zastosować się do obowiązujących w Państwa placówce wytycznych dotyczących wymogów zapobiegania infekcjom i wymogów dotyczących pielęgnacji i czyszczenia skóry.

1. Odczepić nausznic od podkładki i pojedynczo nakładać na uszy dziecka. Umieścić w pozycji pionowej lub poziomej, zależnie od kształtu małżowiny usznej.

**! Uwaga!** Uważać, aby nie zagiąć ani nie pofałdować uszka. Nie wciskać nauszника w przypadku zbyt dużych małżowin usznych. Nie nakładać na podrażnioną skórę.

2. Przycisnąć delikatnie krawędzie nauszника do powierzchni skóry aby zapewnić dokładne przyleganie. Unikać mocowania nauszników na włosach. Nie naciskać na centralną, wybrzuszoną część nauszника.



**Ważne!** Skuteczność tłumienia hałasu zależy od dokładności przylegania. Przy zmianie pozycji dziecka sprawdzić, czy nausznic dobrze przylega.


3. Aby zmniejszyć przyczepność hydrożelu w przypadku wrażliwej skóry, przed kontaktem ze skórą noworodka dotknąć nausznic czystym wacikiem.

**! Uwaga!** Ocenić stan skóry według protokołu pielęgnacji skóry, stosowanego w Państwa placówce. Zaprzestać używania nauszników w przypadku wystąpienia u pacjenta podrażnienia, obtarcia lub obrzęku.

4. Uważnie zdejmować nauszники. Nawilżyć wacik i delikatnie dotykać nim krawędzi nauszника, aby odkleić hydrożel. Przytrzymać skórę poniżej i delikatnie unieść krawędzie nauszника.

Usuwać jednorazowe wkładki uszne poprawnie.

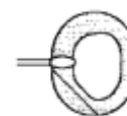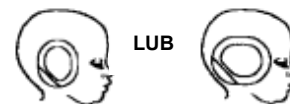

 Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA +1 650-802-0400 • www.natus.com	<b>[EC] [REP]</b> Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Niemcy
---	---

