

Naudojami saugos ženklai:

Ženklas

Reikšmė



Žr. pateikiamą dokumentaciją



Naudoti tik su vienu pacientu, draudžiama naudoti pakartotinai

LOT

Partijos kodas / siuntos numeris



Galiojimo data / Naudoti iki

Skirtas trumpalaikiam naudojimui gydymo įstaigoje, neišnešiotiems kūdikiams, tik stebimoje aplinkoje. Tik Rx.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Svarbi informacija. Valydami odą, laikykitės savo gydymo įstaigoje taikomų infekcijų kontrolės ir odos priežiūros protokolų, neišnešiotų kūdikių odą tepkite hidrogelio lipalu, užtikrinkite tinkamą naudojimo trukmę ir tinkamai likviduokite.

1. Nuo ausinių „MiniMuffs“ nuimkite dangalą ir jas po vieną uždėkite kūdikiui ant galvos. Ausines galima uždėti taip:




⚠️ Įspėjimas! Saugokitės, kad neužlenktumėte ar nesulenktumėte ausies. Nebandykite per jėgą pakišti stambesnes ausis po ausinėmis. Draudžiama dėti ant pažeistos odos.

2. Švelniai, bet tvirtai spausdami ausines, užtikrinkite gerą hermetiškumą. Nerekomenduojama ausinių dėti ant plaukų. Draudžiama spausti iškilą ausinių vidurį.

Svarbi informacija. Triukšmo slopinimo lygis priklauso nuo to, ar ausinės yra pakankamai hermetiškos. Keisdami kūdikio kūno padėtį, tikrinkite ausinių hermetiškumą.

3. Kad hidrogelis mažiau liptų prie jautrios odos, prieš dėdami ausinę, hidrogelio paviršių patapšnokite švari medvilnės tamponu arba marle.

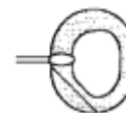


⚠️ Įspėjimas! Odą tikrinkite pagal gydymo įstaigoje priimtą odos priežiūros protokolą. Pastebėję, kad oda sudirginta ar nubrozdirinta arba yra edema, nebenaudokite ausinių.

4. Nuimdami ausines, būkite atsargūs. Sudrėkintu vatos arba marlės tamponu lėtai atpalaiduokite hidrogelį po ausinių kraštu. Prilaikykite apačioje esančią odą ir švelniai kelkite ausinę už krašto.



Tinkamai likviduokite vienkartinio naudojimo ausines.

 <p>Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA • JAV +1 650-802-0400 • www.natus.com</p>	<p>EC REP Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Vokietija</p>
---	--

