

## Sigurnosni simboli koji se koriste:

### Simbol

### Značenje



Konzultirajte priloženu dokumentaciju



Namijenjeno samo jednom pacijentu, ne koristite za više pacijenata



Kod serije / serijski broj



Rok valjanosti / Trajnost proizvoda

**Za kratkoročnu uporabu u bolnici na nedonoščadi samo pod nadzorom. Samo na liječnički recept.**

## UPUTE ZA UPORABU:

**Važno!** Pri čišćenju kože, uporabi hidrogela na koži nedonoščadi, primjerenom duljini uporabe i zbrinjavanju poštujujte protokole svoje ustanove za kontrolu infekcija i čišćenje i njegu kože.

1. Izvadite MiniMuffs naušnjake iz pakiranja i postavite na novorođenče jedan po jedan. Postavite u jednu od ovih orijentacija:




**⚠️ Pozor!** Pazite da ne savijete ili prelomite uho. Ne gurajte velike uši u naušnjake. Postavljajte samo na zdravu kožu.

2. Pritisnite naušnjake na mjesto, nježno ali čvrsto, kako bi dobro brtvili. Izbjegavajte postavljati naušnjake na kosu. Nemojte pritiskati izdignuto središte naušnjaka.

**Važno!** Smanjenje buke ovisi o dobrom brtvljenju. Pri vraćanju bebe provjerite brtve li naušnjaci dobro.

3. Kako biste smanjili prljanje hidrogela na osjetljivoj koži, tapkajte po površini hidrogela čistom vatom ili gazom prije postavljanja naušnjaka na bebu.

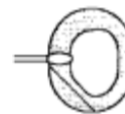


**⚠️ Pozor!** Pregledajte kožu djeteta prema protokolu za njegu kože kojeg se pridržava vaša ustanova. Ako dođe do iritacije, abrazije ili edema, prekinite s uporabom.

4. Naušnjake skidajte uz najveću pozornost. Navlažite vatu ili gazu te polako zalazite pod rub naušnjaka kako bi hidrogel otpustio. Pridržavajući kožu lagano odignite rub naušnjaka.



Pobrinite se za pravilno zbrinjavanje naušnjaka.

 Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA • SAD +1 650-802-0400 • www.natus.com	<b>EC REP</b> Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Njemačka
---	---

