



OTOSuite er en softwareplatform, som understøtter diverse måleapparater, som f.eks. audiometeret. Andre understøttede apparater omfatter f.eks. Immittance instrumenter eller udstyr til PMM Målemodul.

Du kan supplere dine test i AuditBase med andre test, som kun er tilgængelige i OTOSuite. I OTOSuite kontrolpanelet i AuditBase kan du åbne OTOSuite i fuldskræmstilstand ved at klikke på knappen OTOSuite.


AuditBase åbner automatisk OTOSuite i fuldskræmstilstand, hvis du aktiverer funktioner, som ikke findes i OTOSuite kontrolpanelet i AuditBase. Dette omfatter:

- Alle funktioner i OTOSuite, som ikke findes på Tone Audiometri fanebladet
- Funktioner på Tone fanebladet, som ikke understøttes i OTOSuite kontrolpanelet i AuditBase, som f.eks. funktionen Talk Assistant


AuditBase åbner f.eks. automatisk OTOSuite i fuldskræmstilstand, hvis du aktiverer en af følgende funktioner:

- Tale Audiometri
- Specielle Tone Audiometri test
- Immittance test, PMM Målemodul osv.

Når du arbejder i OTOSuite, kan du udnytte audiometerets taleafspiller og scorefunktioner fuldt ud. Du kan også drage direkte fordel af andre måletyper, som er tilgængelige i OTOSuite, uden at skulle starte NOAH moduler.

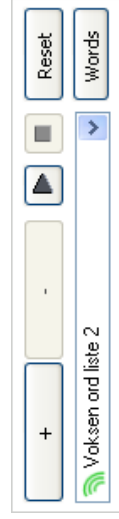

Billederne viser funktionerne Afspilning og Score på OTOSuite Tale Audiometri modulet

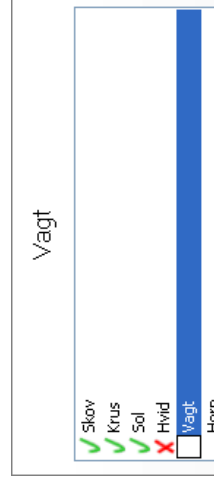

Hvis du indlæser en Brugerdefineret test i OTOSuite kontrolpanelet i AuditBase, som indeholder valg, der ikke findes i dette kontrolpanel, åbner AuditBase automatisk det relevante testskræmbillede i OTOSuites fuldskræmstilstand. Klik på knappen AuditBase på værktøjslinjen i OTOSuite, eller anvend genvejstasten **O** (i Audiometri modulet) eller **Alt+F4** (i andre moduler) på tastaturet for at lukke vinduet OTOSuite og vende tilbage til AuditBase.



Oprettelse og redigering af Brugerdefineret test

Alle konfigurationer og indstillinger angives i OTOSuite, herunder oprettelse og redigering af Brugerdefineret test

Lagring af OTOSuite data

AuditBase viser muligvis ikke alle de data, der måles i OTOSuite. Alle data, der indsamles i OTOSuite, lagres dog for den aktuelle AuditBase patient. Du kan altid få vist dataene i OTOSuite, uanset om du har startet OTOSuite som et NOAH modul eller via OTOSuite kontrolpanelet i AuditBase.

VIGTIGT! Se OTOSuite brugervejledningen og brugervejledningen til audiometeret for at få mere detaljerede oplysninger om sikkerhed. De indeholder oplysninger og advarsler, som skal efterkommes for at sikre sikker anvendelse af OTOSuite og audiometeret. Eventuelle regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.

Producent

GN Otometrics A/S
Hørskættæn 9, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 45 75 55 55, Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: info@gnotometrics.dk; www.otometrics.com

Producentens ansvar

Producenten frasiger sig alt ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er blevet efterstet eller repareret af en tredjepart.

Copyright © 2011, GN Otometrics A/S

Al information og alle illustrationer og specifikationer i denne guide grunder sig på den senest tilgængelige produktinformation ved publikationen af dokumentet. GN Otometrics A/S forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at foretage ændringer.

Teknisk bistand

Kontakt venligst din GN Otometrics leverandør.