

OTOsuite
Asennusopas

Dok. Nro 7-50-1430-FI/08

Osa nro 7-50-14300-FI



otometrics
a division of natus.

Tekijänoikeutta koskeva huomautus

© 2013, 2018 GN Otometrics A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. ® Otometrics, Otometrics-kuvake, AURICAL, MADSEN, Otoscan, ICS ja HORTMANN ovat GN Otometrics A/S-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Version julkaisupäivä

27.9.2018 (199290)

Tekninen tuki

Ota yhteyttä toimittajaan.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	4
2	Vakioasennus	4
3	Mukautettu asennus	11
4	OTOSuite-ohjelman asennuksen purku	15
5	Valmistaja	15

1 Johdanto

Vakioasennus

Tässä osiossa kuvataan OTOsuite- ja OTOsuite REPORTS -ohjelmien vakioasennukset ja OTOsuite-ohjelmiston konfigurointi ennen käyttöä.

Lue kohta [Vakioasennus](#) ► 4

Mukautettu asennus ja erikoistoimintojen asennus

Tässä osiossa kuvataan kohteen OTOsuite asennuksen mukautus.

Voit lisätä joukon erikoistoimintoja kuten puhemateriaalin, erikoistestit sekä muita sovelluksia asennukseen.

Lue kohta [Mukautettu asennus](#) ► 11

2 Vakioasennus

Vakioasennus

Tässä osiossa kuvataan OTOsuite- ja OTOsuite REPORTS -ohjelmien vakioasennukset ja OTOsuite-ohjelmiston konfigurointi ennen käyttöä.

Jos haluat konfiguroida kohteen OTOsuite, katso [OTOsuite-ohjelman konfigurointi](#) ► 9.

Asenna testauslaite OTOsuite-ohjelman asennuksen jälkeen. Lue yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käyttöohjeesta.

Mukautettu asennus ja erikoistoimintojen asennus

Jos haluat mukauttaa asennuksen tai asentaa erikoissovelluksia erikseen, katso [Mukautettu asennus](#) ► 11.

2.1 Laitteistovaatimukset

- 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz)
- 2 Gt:n RAM (suositus 4 Gt)
- 8 Gt vapaata levytilaa OTOsuite-ohjelman asennukseen.
- Microsoft® Windows® 7 SP1 (32- tai 64-bittinen) tai Microsoft Windows 8.1 (64-bittinen) tai Microsoft Windows 10 (32- tai 64-bittinen)
- Kaikki Microsoft Windows -päivitykset Microsoft Updatesta (tai .NET 4.6 asennettuna)
- USB-portti lisävarusteiden liittämiseen, v. 2.0 tai uudempi
- DVD-asema (vain joitakin toimintoja varten)
- 32-bittinen värinäyttö, 1024 x 768 pikseliä
- Noah-tilan käyttöä varten: NOAH 3/NOAH 3 ja ENT:t (versio 3.7 tai uudempi) tai Noah 4 (versio 4.1 tai uudempi) tai OTObase®.

Huomautus • Jos käytät Otometricsin tarjoamaa puhemateriaalia, tarkista puhemateriaalin asennusvälineeltä, että tietokoneessasi on riittävästi vapaata levytilaa.

2.2 Vakioasennusmenettely

Tärkeää • Älä liitä testauslaitetta ja lisävarusteita ennen kuin ohjelma on kokonaisuudessaan asennettu.

1. Noah/OTObase

Vakioasennus

- Jos suoritat OTOsuite -vakioasennusta ja aiot käyttää kohdetta OTOsuite kohteen Noah tai OTObase kanssa, asenna ensin Noah- tai OTObase -ohjelmisto. Se mahdollistaa mittausten tallentamisen asiakastietojen kanssa kansioon Noah/OTObase.

Jos asennat Noah/OTObase-järjestelmän, kun OTOsuite on jo asennettu, voit rekisteröidä OTOsuite-sovelluksen moduuliksi kohdassa Noah/OTObase suorittamalla tiedoston **PostNOAHInstall**. Lue kohta **Kohteen Noah tai OTObase asentaminen OTOsuite -asennuksen jälkeen** ► 14.

2. Integroitu Otometrics -puhemateriaali:

Voit asentaa integroidun Otometrics -puhemateriaalin toimitetulta puhemateriaalitalennusvälineeltä, katso **Puhemateriaalin asennus** ► 13.

3. OTOsuite

Jos Noah/OTObase on asennettu tietokoneelle, OTOsuite asennetaan automaattisesti kansioon Noah/OTObase.

2.3 Asennussovelluksen käynnistys

Huomautus • OTOsuite-ohjelmaa ei voi asentaa jaetulle verkkoasemalle.

Asennuksen käynnistäminen pakatusta tiedostosta

1. Napsauta tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Pura kaikki...**
2. Varmista, että valintaruutu **Näytä lopuksi puretut tiedostot** on valittu.
3. Napsauta **Pura**-painiketta.

Asennustiedostot puretaan ja näytetään resurssienhallinnassa.

Asennuksen käynnistäminen DVD:ltä tai muistitikulta

1. Laita asennus-DVD tai -muistitikku tietokoneen asemaan.


2. Jos sisältö ei näy automaattisesti, navigoi resurssienhallinnalla kyseiseen asemaan.

Asennuksen käynnistys

1. Sulje kaikki Windows-ohjelmat asennusohjelman toiminnan varmistamiseksi.
2. Älä liitä mitään lisävarusteita, ennen kuin asennus on valmis.
3. Kaksoisnapsauta **OTOSuiteInstaller** -tiedostoa käynnistääksesi asennuksen.
Windows 10 -käyttäjät: napsauta tiedostoa oikealla painikkeella ja valitse **Suorita järjestelmänvalvojana**.
4. Jos haluat suorittaa vakioasennuksen, katso [Asennusprosessi ▶ 6](#)
5. Jos haluat mukauttaa asennuksen, katso [Mukautettu asennus ▶ 11](#).

2.4 Asennusprosessi

1. Käynnistä asennusovellus. Lue kohta [Asennusovelluksen käynnistys ▶ 5](#)
2. Asennusovelluksen näyttö tulee esille.
3. Napsauta valitaksesi, haluatko asentaa kohteen OTOSuite.

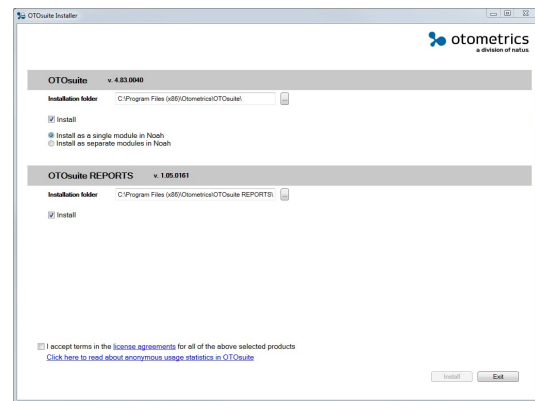

4. Napsauta valitaksesi, haluatko asentaa kohteen OTOSuite yhtenä moduulina kansioon Noah/OTObase tai erillisinä moduuleina:
 - **Asenna yhtenä Noah-moduulina:**
OTOSuite-moduulit asennetaan yhden OTOSuite-kuvakkeen alle Noah/OTObase-järjestelmään.
 - **Asenna erillisinä Noah-moduuleina:**
OTOSuite-moduulit asennetaan erillisinä kuvakkeina Noah/OTObase-järjestelmään.
Jos haluat asentaa kohteen Noah/OTObase asennettuasi kohteen OTOSuite, katso [Kohteen Noah tai OTObase asentaminen OTOSuite -asennuksen jälkeen ▶ 14](#).
5. Napsauta valitaksesi, haluatko asentaa kohteen OTOSuite REPORTS osana OTOSuite -asennusta.
Tarvittaessa voit suorittaa asennusovelluksen myöhemmin asentaaksesi kohteen OTOSuite REPORTS.
6. Hyväksy lisenssisopimukset napsauttamalla.
7. Tarvittaessa voit näyttää käyttötilastotyökalun tiedot napsauttamalla. Työkalusta ja sen käytöstä poistamisesta, katso [OTOSuite-ohjelman konfigurointi ▶ 9](#).
8. Napsauta **Asenna**-kohtaa käynnistääksesi asennuksen.
9. Kun asennus on valmis, napsauta **Lopeta**-kohtaa.

2.5 OTOSuite-laitteen käynnistäminen

Se, miten käynnistät OTOSuite-ohjelman, riippuu siitä, miten haluat suorittaa OTOSuite-ohjelman.

- Noah/OTObase-järjestelmän kanssa
- stand-alone-tilassa

Kytkeyty Noah/OTObase -tietokantaan

Se, miten käynnistät OTOsuite-ohjelmiston Noah- tai OTObase-tietokannan kanssa, riippuu siitä, kuinka konfiguroit OTOsuite-ohjelmiston.

OTOsuite-ohjelmiston käynnistäminen suoraan

1. Napsauta OTOsuite-kuvaketta tietokoneen työpöydällä tai Windowsin **Aloita**-valikossa (**Kaikki ohjelmat > Otometrics > OTOsuite**).
Noah- tai OTObase-potilasselain ilmestyy näkyviin.
2. Valitse potilas. OTOsuite avautuu ja yhdistyy Noah- tai OTObase-tietokantaan.

Käynnistäminen Noah- tai OTObase-järjestelmän Moduulivalikoimasta

1. Käynnistä Noah tai OTObase.
2. Napsauta Noah- tai OTObase-järjestelmän Moduulivalikoimassa OTOsuite-moduulia, jonka haluat avata.

Käynnistäminen Noah- tai OTObase-mittauksesta

1. Käynnistä Noah tai OTObase ja valitse mittaus.
OTOsuite avaa moduulin, joka soveltuu parhaiten mittauksen näyttämiseen.

Erillinen

Voit käyttää OTOsuite-ohjelmistoa stand-alone-tilassa seuraavissa tilanteissa:

- Kumpaakaan järjestelmästä Noah ja OTObase ei ole asennettu tietokoneelle.
- OTOsuite on asennettu tietokoneelle Noah/OTObase-järjestelmän kanssa mutta sitä ei ole kytketty Noah/OTObase-tietokantaan. Katso kohdasta OTOsuite Asennusopas, miten kytketään Noah/OTObase-tietokantaan.

OTOsuite-ohjelmiston käynnistäminen stand-alone-tilassa

1. Käynnistä OTOsuite napsauttamalla OTOsuite-kuvaketta tietokoneen työpöydällä (sinun pitää ehkä ensin luoda pikakuvake).



tai

2. Käynnistä OTOsuite napsauttamalla OTOsuite-kuvaketta Windowsin **Aloita**-valikossa (**Kaikki ohjelmat > Otometrics > OTOsuite**).











OTOsuite-asetusten konfigurointi

- Kun käynnistät OTOsuite-ohjelmiston ensimmäistä kertaa, ohjattu konfigurointitoiminto näytetään automaattisesti.
- Jos olet päivittänyt OTOsuite-ohjelmiston, valitse **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
- Lue kohta [OTOsuite-ohjelman konfigurointi](#) ► 9.

2.5.1 OTOsuite -kuvakkeet Noah/OTObase-ohjelmistossa

Riippuen siitä, miten OTOsuite on asennettu, Noah/OTObase **Moduulivalikoima** näyttää joko yhden OTOsuite-kuvakkeen tai kuvakkeen kullekin moduulille OTOsuite-ohjelmassa. Jos näkyvässä on vain yksi kuvake, se käynnistää ohjelman OTOsuite käynnistysasetustesi mukaisesti, muutoin valittu kuvake avaa vastaavan OTOsuite -moduulin.

Jos haluat muuttaa näytettävien OTOsuite-kuvakkeiden lukumäärää Noah/OTObase-ohjelmassa, katso [Asennusprosessi](#) ► 6.

OTOSuite -moduuli	Noah/OTObase -kuvake
Käynnistä OTOsuite käynnistysasetustesi mukaisesti	
Video-otoskopiamoduuli	
Otoakustiset emissiot -moduuli	
Immittanssimoduuli	
Audiometriamoduuli	
Neuvonta ja simulointi -moduuli	
PMM-moduuli	
HIT-moduuli	

2.6 OTOsuite -käyttöoppaat

Kun olet asentanut OTOsuite-laitteen, löydät OTOsuite-käyttöoppaat ja muun tarvittavan dokumentaation tietokoneeltasi. Avaa **Aloita**-valikosta **OTOSuite Manuals**, joka sisältää yleiskatsauksen ja linkit kaikkiin käyttöoppaisiin.

Lue myös OTOsuite-testauslaitteiden ja tiettyjen tutkimusmoduulien käyttöohjeet ja ohjeosiot (help) verkossa.

Huomautus • Tutustu ennen testauksen aloittamista testauslaitteeseen ja OTOsuite-ohjelmaan sekä niiden toimintoihin ja asetuksiin.

2.7 Testauslaitteiden asennus

Katso laitteen käyttöoppaan kohta Asennus.

Jos olet kytkenyt tutkimuslaitteen ennen OTOsuite-ohjelman asentamista

Tärkeää • Älä liitä testauslaitetta ja lisävarusteita ennen kuin ohjelma on kokonaisuudessaan asennettu.

Jos olet kytkenyt tutkimuslaitteen ennen OTOsuite-ohjelman asentamista, voit kärsiä ongelmista siksi, että Windows on joko asentanut laitteelle väärän ohjaimen tai ohjainta ei ole asennettu lainkaan.

Ongelman ratkaisu:

1. Etsi laite Windowsin Laitehallinnasta.
2. Napsauta laitteen nimeä hiiren oikealla painikkeella ja valitse ohjaimen päivittäminen. Anna Windowsin etsiä automaattisesti oikea laiteohjain.

Noudata varovaisuutta • Laite voi näkyä Laitehallinnassa usealla rivillä, jos sillä on useita ohjaimia. Toista edellä mainittu menettely jokaiselle kohdalle (esimerkiksi "SoundHub 100 -kuulokkeet ja mikr." ja "SoundHub 100 -kaiuttimet").

2.8 OTOsuite-ohjelman konfigurointi

Tässä osiossa kuvataan kohteen OTOsuite konfigurointi ennen käyttöä.

Ohjattu konfigurointitoiminto ohjaa sinut läpi prosessin, jolla voit kustomoida tiettyjä OTOsuite-ohjelmaa koskevia ominaisuuksia ja toimintoja.

1. Kohdassa OTOsuite valitse **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
2. Jos haluat määrittää yleiset OTOsuite-toiminnot, napsauta kohtaa **Seuraava**.
3. Jos haluat kytkeä testauslaitteen tiettyyn moduuliin ja säätää moduulikohtaista toimivuutta, napsauta kohtaa **Määritä...** haluamasi moduulin vieressä.

Yleinen konfigurointi kuvataan OTOsuite -käyttöoppaissa.

Huomautus • OTOsuite -asennuksen suorittama äänikortin määrittäminen voi muuttaa Windowsin oletusasetuksia äänikortille. Käytä Windowsin toimintoa oletusasetusten muuttamiseen.

2.8.1 Lisenssiavaimien syöttäminen

Lisenssiavaimesi ovat OTOsuite -asennuspaketissa. Syötä lisenssiavaimesi OTOsuite -ohjelmassa seuraavasti:

1. Valitse kohdassa OTOsuite **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
2. Napsauta kohtaa **Määritä...** sen moduulin vieressä, jonka lisenssiavaimet haluat syöttää.
3. Napsauta kohtaa **Seuraava**, kunnes **Lisenssiavaimet**-valintaikkuna tulee nähtyksi. Syötä lisenssiavaimet ja napsauta kohtaa **Lopeta**.

2.8.2 Käyttöstatistiikka

OTOSuite-ohjelmiston asennuksen aikana asennetaan työkalu, jolla voit lähettää nimetöntä käyttöstatistiikkaa Otometricsille. Tämä auttaa meitä ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita paremmin sekä kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme.

Työkalu lähettää nimetöntä käyttöstatistiikkaa Otometricsille, kun tietokone on yhdistetty internetiin.

Voit kytkeä käyttöstatistiikkatyökalun päälle/pois päältä milloin tahansa OTOSuite-ohjelmiston ohjatulla konfigurointitoiminnolla.

1. Valitse kohdassa OTOSuite **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
2. Napsauta kohtaa **Seuraava**.
3. Napsauta **Valinnat** -näytöllä valitaksesi/poistaaksesi valintaruudun **Allow anonymous usage statistics** (Salli nimetön käyttöstatistiikka) .

Käyttöstatistiikka koostuu seuraavista tiedoista

Vain OTOSuite-ohjelman käyttöön liittyvä nimetön statistiikka, kuten kuinka usein eri toimintoja on käytetty ja kuinka usein eri painikkeita ja valikkokohtia on klikattu. Työkalu ei lähetä mitään henkilökohtaisia tietoja tai potilastietoja, eikä mitään tietoa, jonka avulla käytetty tietokone voidaan jäljittää.

2.8.3 Kohteen OTOSuite kytkeminen Noah- tai OTObase-ohjelmistoon

Huomautus • Seuraava koskee vain tapauksia, joissa Noah tai OTObase on asennettu tietokoneelle.

Yhdistä OTOSuite tietokantaan käynnistämisen yhteydessä

Voit konfiguroida OTOSuite-ohjelmiston niin, että se on automaattisesti kytkettynä Noah- tai OTObase-tietokantaan riippumatta siitä, käynnistetäänkö OTOSuite suoraan vai Noah- tai OTObase-järjestelmästä.

1. Kohdassa OTOSuite valitse **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
2. Napsauta **Seuraava**, kunnes esillä on Noah/OTObase-näyttö.
3. Ota käyttöön asetus **Yhdistä OTOSuite tietokantaan käynnistämisen yhteydessä**.
Käytettävissä olevat tietokannat näkyvät alla.
4. Valitse tietokanta, jota haluat käyttää.
5. Käynnistä OTOSuite uudelleen valinnan käyttöön ottamista varten.

Muun kuin OTOSuite-moduulin käynnistäminen Noah- tai OTObase-järjestelmästä

Jos käynnistät muun kuin OTOSuite-moduulin Noah/OTObase-järjestelmästä, OTOSuite suljetaan. Voit asettaa OTOSuite:n sulkemisen pyytämättä.

Jos sinulla on OTOSuite-ohjelmistossa tallentamatonta tietoa, sinua kehoitetaan tallentamaan tiedot ennen kuin OTOSuite sulkeutuu.

1. Kohdassa OTOSuite valitse **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
2. Napsauta **Seuraava**, kunnes esillä on Noah/OTObase-näyttö.
3. Ota käyttöön asetus **Sulje OTOSuite automaattisesti, jos haluat käynnistää OTOSuite-ohjelmistosta riippumattoman mittausmoduulin**. (Sinua kehoitetaan tallettamaan kaikki tiedot.)

Ota käyttöön FastView (Jos Noah/OTObase-tuki)

FastView-tiedot voidaan tallentaa kohtaan Noah tai OTObase. Tämä vaihtoehto tarjoaa mahdollisuuden selata tai tarkastella tietojen yhteenvetoja nopeasti käynnistämättä yksittäisiä moduuleja, joilta tiedot on tallennettu.

1. Kohdassa OTOsuite valitse **Työkalut > Ohjattu konfigurointitoiminto**.
2. Napsauta **Seuraava**, kunnes esillä on Noah/OTObase-näyttö.
3. Valitse vaihtoehto **Ota käyttöön FastView**.

3 Mukautettu asennus

Mukautettu asennus ja erikoistoimintojen asennus


Tässä osiossa kuvataan kohteen OTOsuite asennuksen mukautus.

Voit lisätä joukon erikoistoimintoja kuten puhemateriaalin, erikoistestit sekä muita sovelluksia asennukseen.

Kohteen OTOsuiteInstaller exe-tiedoston käynnistäminen konfigurointitilassa

1. Voit käynnistää kohteen **OTOsuiteInstaller** exe-tiedoston konfigurointitilassa navigoimalla exe-tiedoston sisältävään kansioon DOS-komentokehote-ikkunassa: kirjoita **OTOsuiteInstaller.exe /configure**.

Asennuksen mukauttaminen

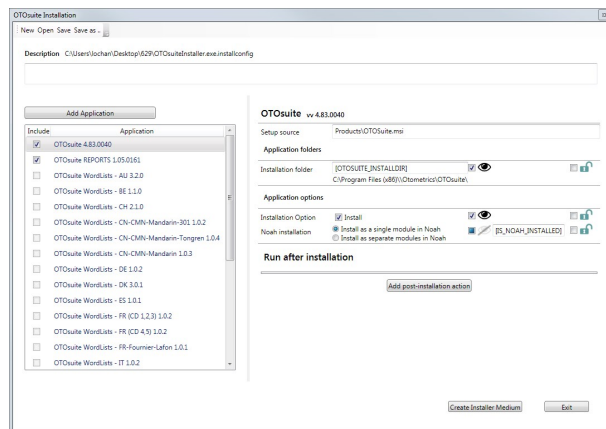

- **Kuvaus-kenttä**

Tämä kenttä sisältää kuvauksen parhaillaan muokattavasta asetustiedostosta, jos sellainen on.

Syötä tarvittaessa haluamasi teksti asennuksen tai asiakkaan täydentämiseksi. Tämä voi auttaa huoltohenkilöstöä tunnistamaan tiedoston.

- **Lisää sovellus-painike**

Napsauta **Lisää sovellus**-painiketta lisätäksesi **.msi**-lisämoduuleja tai -sovelluksia asennuspakettiin.

Huomautus • Jos viittaat sovelluksiin, jotka on tallennettu käyttäjäkohtaisiin kansioihin kuten Käyttäjät > Työpöytä, Käyttäjät > Ladatut tiedostot tai Käyttäjät > Tiedostot, ja suoritat asennuksen ilman, että olet luonut asennusvälinettä, asennus ei voi viitata näihin sovelluksiin asennettaessa toiselle tietokoneelle.

1. Valitse valintaruutuja valitaksesi toimintoja, joita haluat sisällyttää asennukseen. Tämä valintaikkuna varmistaa, että kaikki viitatuksi **.msi** -tiedostot ovat olemassa.

Jokaista sovellusta kohden voit valita/poistaa joukon asetuksia näytön oikeassa reunassa.

- Valintaruutu sovelluksen tai toiminnon valitsemista/poistamista varten asennusasetuksissa.



- Piilota/Näytä:


Tämä asetus piilottaa tai näyttää luettelon toiminnon **OTOSuiteInstaller** -sovelluksessa.



- Lukitse/Avaa:

Tämä asetus lukitsee tai avaa luettelon toiminnon **OTOSuiteInstaller** -sovelluksessa, jolloin asennusta suorittava henkilö ei voi valita sitä tai voi valita sen.

2. **Suorita asennuksen jälkeen**-paneelissa voit napsauttaa **Lisää asennuksen jälkeinen toimenpide**-kohtaa lisätäksesi sovelluksia tai lisätiedostoja, kuten erätiedostoja, suoritettavaksi asennuksen jälkeen.

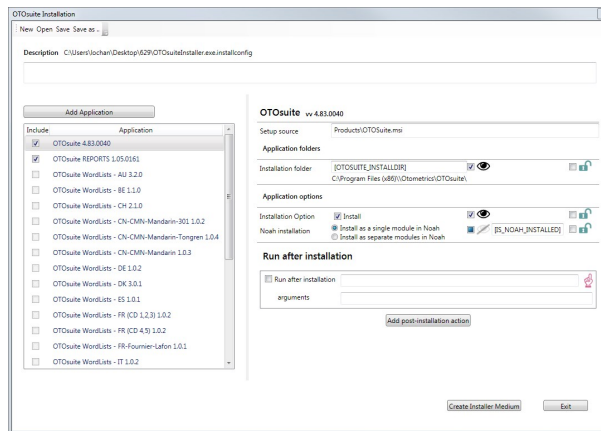

3. **Luo tallennusväline**

Kun olet lisännyt sovelluksia tai lisätiedostoja suoritettaviksi asennuksen jälkeen, napsauta **Luo tallennusväline**-kohtaa avataksesi valintaikkunan, jossa voit luoda haluamasi kansion ja tallentaa tiedostot ja tiedostorakenteen lähetettäväksi asennuksen suorittajalle.

4. Kun olet asettanut sovellukset ja moduulit, jotka haluat sisällyttää asennukseen, tallenna mukautettu tiedosto kansioon, jossa tiedosto **OTOSuiteInstaller** sijaitsee.

Mukautetun tiedoston oletusnimi on **OTOSuiteInstaller.exe.installconfig**. Jos tallennat tiedoston toisella nimellä asennuskansioon, asennusohjelma ei käytä asetustiedostoa.

Huomautus • Voit muokata tiedostoa *OTOSuiteInstaller.installconfig* ja tallentaa sen valmiiksi määritetyssä muodossa, jolloin sinun ei tarvitse toistaa asetteluprosessia, kun uusia riippuvuuksia ei ole lisätty.

5. Napsauta kohtaa **Poistu**.

6. Asenna mukautetut asetukset suorittamalla tiedosto **OTOSuiteInstaller** kuten kuvataan kohdassa [Asennusprosessi](#) ► 6.

3.1 Mukautettu asennusjärjestys

Tärkeää • Älä liitä testauslaitetta ja lisävarusteita ennen kuin ohjelma on kokonaisuudessaan asennettu.

1. Noah

- Jos aiot käyttää kohdetta OTOsuite ohjelmiston Noah kanssa, asenna ensin Noah -ohjelmisto. Se mahdollistaa mittausten tallentamisen asiakastietojen kanssa kansioon Noah.
Jos asennat Noah-järjestelmän, kun OTOsuite on jo asennettu, voit rekisteröidä OTOsuite-sovelluksen moduuliksi kohdassa Noah suorittamalla tiedoston **PostNOAHInstall**. Lue kohta [Kohteen Noah tai OTObase asentaminen OTOsuite -asennuksen jälkeen](#) ► 14.

2. Integroitu Otometrics -puhemateriaali:

Voit asentaa integroidun Otometrics -puhemateriaalin toimitetulta puhemateriaalilennusvälineeltä, katso [Puhemateriaalin asennus](#) ► 13.

3. OTOsuite

Jos Noah/OTObase on asennettu tietokoneelle, OTOsuite asennetaan automaattisesti kansioon Noah/OTObase.

3.2 Puhemateriaalin asennus

Puhemateriaalin asennus käyttämällä OTOsuite -asennussovellusta

Huomautus • Jos käytät Otometricsin tarjoamaa puhemateriaalia, tarkista puhemateriaalin asennusvälineeltä, että tietokoneessasi on riittävästi vapaata levytilaa.

- Noudata ohjeita lisätoimintojen asentamisesta: katso [Mukautettu asennus](#) ► 11.

Puhemateriaalin asennus erikseen

- Laita OTOsuite -puhemateriaalin asennuslevy levyasemaan.
Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti. Jos se ei käynnisty, avaa Windowsin **Suorita**-komento ja kirjoita **d:\setup.exe**, jossa **d:** viittaa levyasemaasi.
- Ohjattu asennus opastaa asennuksen eri vaiheissa.

Puhemateriaalin asennuksen jälkeen

Kun olet asentanut puhemateriaalin, voit valita puheluettelot asiaankuuluvissa OTOsuite -tutkimusmoduuleissa. Katso erityisen tutkimuslaitteen käyttöoppaasta ohjeet puhemateriaalin käytöstä.

3.3 Kohteen OTOsuite REPORTS asennus erikseen

Jos et ole asentanut kohdetta OTOsuite REPORTS osana yleistä OTOsuite -asennusta, voit tehdä sen erikseen. OTOsuite REPORTS voidaan asentaa tietokoneelle, jolle OTOsuite tai OTObase eivät ole asennettuina tai tietokoneelle, jolle ne on asennettu.

Jos olet luonut raporttimallit erillisellä tietokoneella, mallit on kopioitava tietokoneelle, jolle OTOsuite tai OTObase on asennettu. Lue kohta OTOsuite REPORTSKäyttöopas.

Laitteistovaatimukset

Tietokone, jolle OTOsuite tai OTObase eivät ole asennettuina

- 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz)
- 1 Gt:n RAM (suositus 2 Gt)
- 1 Gt vapaata levytilaa ohjelman asennukseen. Lisälevytilaa tarvitaan edellytysten asennukseen.
- Microsoft® Windows 7 (32- tai 64-bittinen) tai uudempi
- 32-bittinen värinäyttö, 1024 x 768 pikseliä

Tietokone, jolle OTOsuite tai OTObase on asennettu


Jos OTOsuite REPORTS asennetaan tietokoneelle, jolla OTOsuite tai OTObase on jo asennettuna, lisätietoa järjestelmän vaatimuksista antaa OTOsuite tai OTObase.

Asennusprosessi

- Noudata ohjeita lisätoimintojen asentamisesta: katso [Mukautettu asennus](#) ► 11.

OTOSuite REPORTS-laitteen käynnistäminen

- OTOsuite REPORTS näkyy Otometrics -ohjelmistokansiossa Windowsin "Kaikki ohjelmat" -luettelossa.

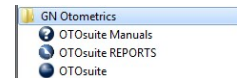

3.4 Kohteen Noah tai OTObase asentaminen OTOsuite -asennuksen jälkeen

Jos asennat Noah- tai OTObase -ohjelmiston ohjelmiston OTOsuite asentamisen jälkeen, OTOsuite-ohjelmistoa ei rekisteröidä Noah/OTObase-ohjelmistoon, eikä OTOsuite-ohjelmistoa ole mahdollista käynnistää Noah/OTObase-ohjelmistosta.

1. Asenna Noah tai OTObase noudattamalla lisätoimintojen asennusohjeita: katso [Mukautettu asennus](#) ► 11.

Ohjelmiston OTOsuite lisääminen Noah/OTObase-ohjelmistoon asennuksen jälkeen

Voit käyttää **PostNOAHInstall**-työkalua lisätäksesi OTOsuite -ohjelmiston Noah/OTObase -ohjelmistoon tai muuttaaksesi tapaa, jolla OTOsuite näkyy Noah/OTObase -ohjelmistossa.

PostNOAHInstall-työkalun suorittaminen

1. Siirry kansioon, johon OTOsuite on asennettu (oletuskansio on c:\Ohjelmatiedostot\Otometrics\OTOSuite).
2. Kaksoisnapsauta **PostNOAHInstall**.
3. Valitse, miten haluat OTOsuite-ohjelmiston näkyvän Noah/OTObase-järjestelmässä, ja napsauta sen jälkeen kohtaa **OK**.

4 OTOsuite-ohjelman asennuksen purku

OTOSuite-asennuksen purku

1. Jos OTOsuite on aktiivisena, lopeta OTOsuite-ohjelma.
2. Käytä Windowsin ohjelmien poisto -toimintoa.

5 Valmistaja

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Tanska
☎ +45 45 75 55 55
📠 +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

Valmistajan vastuu

Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:

- Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilö.
- sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.
- laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.