

AURICAL[®] OTOcam 300

AURICAL OTOcam 300 **Aanbevelingen voor installatie**

Doc.nr. 7-50-1380-NL/02
Onderdeelnr. 7-50-13800-NL

Aanbevelingen voor installatie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw AURICAL OTOcam 300. Lees deze aanbevelingen voor installatie goed door om een optimale werking van de OTOcam 300 te waarborgen.


USB-aansluiting

De OTOcam 300 heeft een USB 2.0- of USB 3.0-poort nodig om te kunnen functioneren. In gevallen waarin de USB-bandbreedte beperkt is, presteert de AURICAL OTOcam 300 mogelijk niet optimaal.

De beste USB-poort vinden



Gebruik bij voorkeur blauwe USB-poorten (3.0).

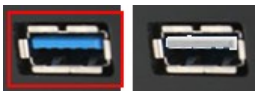

Vermijd het gebruik van een externe USB-hub.



Gebruik geen USB-extenders.



Windows-aanbevelingen

Zorg ervoor dat de meest recente versie van het besturingssysteem wordt gebruikt:

- Kijk op de website van de fabrikant van het stuurprogramma van de grafische kaart voor updates van het specifieke stuurprogramma, en installeer eventuele updates.

Is het opnamescherm Video-otoscopy in OTOsuite zwart?

Als u een zwart beeld ziet in het opnamescherm Video-otoscopie in OTOsuite, controleer dan of de lichtbron van de camera aanstaat wanneer de camera van de houder wordt gehaald en op de USB-poort van de pc wordt aangesloten. Neem contact op met uw dealer als de lichtbron niet aanstaat.

Probeer het volgende als de lichtbron aanstaat:

1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om dit menu te bekijken:

Show full screen image		Alt+Enter
Resolution	Colors [bits]	Framerate [/s]
800x800	16	24
720x720	16	24
650x650	16	24
550x550	16	24
200x200	16	24

Opmerking • De standaardresolutie is 720x720 en werkt op de meeste computers.

2. Probeer de resolutie te verlagen totdat u een afbeelding ziet.
3. Als dit niet lukt en de laagste resolutie '200x200' niet werkt, probeer dan het stuurprogramma van de grafische kaart op uw computer te updaten of, indien mogelijk, over te gaan op een andere grafische kaart.
4. Als een correcte afbeelding alleen wordt weergegeven met een resolutie van minder dan 720x720, is de beschikbare USB-bandbreedte beperkt en dient u een andere USB-poort te proberen.
5. Als u met geen enkele USB-poort een afbeelding met de resolutie 720x720 te zien krijgt, probeer dan onbelangrijke USB-apparaten zoals mobiele telefoons, USB-modems enz. los te koppelen.

Opmerking • Sommige USB-apparaten zijn intern aangesloten en kunnen alleen via menu's, snelkoppelingen, knoppen, het bedieningspaneel of apparaatbeheer worden uitgeschakeld.

Voor gevorderde gebruikers

Als het loskoppelen van USB-apparaten niet helpt, kunt u in apparaatbeheer proberen om de USB-apparaten een voor een uit te schakelen tot er een afbeelding verschijnt.

Opmerking • Sommige apparaten reserveren zelfs als ze niet worden gebruikt USB-bandbreedte.

Kennisgeving auteursrechten

© 2013, 2019 Natus Medical Denmark ApS. Alle rechten voorbehouden.® Otometrics, het pictogram Otometrics, AURICAL, MADSEN, Otoscan, ICS en HORTMANN zijn geregistreerde handelsmerken van Natus Medical Denmark ApS in de VS en/of andere landen.

Releasedatum versie

07-03-2019 (209165)

Technische ondersteuning

Neem contact op met uw leverancier.