

AURICAL[®] OT0cam 300

AURICAL OT0cam 300 **Recomandări privind instalarea**

Doc. nr. 7-50-1380-RO/02
Partea nr. 7-50-13800-RO

Recomandări privind instalarea

Vă felicităm pentru achiziționarea aparatului AURICAL OTOcam 300. Vă rugăm să parcurgeți aceste recomandări privind instalarea pentru a asigura o funcționare optimă a aparatului OTOcam 300.


Configurarea USB

Otocam 300 necesită un port USB 2.0 sau USB 3.0 pentru a funcționa. În cazurile în care lățimea de bandă USB este limitată, este posibil ca AURICAL OTOcam 300 să nu atingă performanțe optime.

Găsirea celui mai bun port USB



Sunt preferabile porturile USB (3.0) albastre.

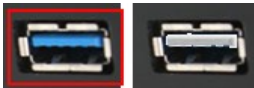

Evitați utilizarea unui HUB USB extern.



Nu folosiți prelungitoare USB.



Recomandări referitoare la Windows

Asigurați-vă că sistemul de operare conține toate actualizările:

- Verificați pagina de start a producătorului driverului pentru placa video, pentru a vedea dacă există actualizări ale driverului dumneavoastră și, după caz, pentru a le instala.

Ecranul de captură pentru video-otoscopie din OTOsuite este negru?

Dacă vedeți o imagine neagră în ecranul de captură pentru video-otoscopie din OTOsuite, asigurați-vă că sursa de lumină a camerei este pornită atunci când camera este scoasă din suport și conectată la portul USB al calculatorului. Dacă sursa de lumină nu este pornită, vă rugăm să vă contactați distribuitorul.

Dacă sursa de lumină este pornită, încercați următoarele:

1. Dați clic dreapta pe imagine pentru a vedea acest meniu:

| Show full screen image | | Alt+Enter |
|------------------------|---------------|-----------------|
| Resolution | Colors [bits] | Framerate [1/s] |
| 800x800 | 16 | 24 |
| 720x720 | 16 | 24 |
| 650x650 | 16 | 24 |
| 550x550 | 16 | 24 |
| 200x200 | 16 | 24 |

Observație • Rezoluția implicită este de 720 x 720 și va funcționa pe majoritatea calculatoarelor.

2. Încercați să reduceți rezoluția până vedeți o imagine.
3. Dacă demersul eșuează și rezoluția minimă „200 x 200” nu funcționează, ar trebui să încercați să actualizați driverul plăcii video de pe calculatorul dumneavoastră sau să treceți la altă placă video, dacă este posibil.
4. Dacă apare o imagine corectă doar la rezoluții sub 720 x 720, lățimea de bandă USB disponibilă este limitată și ar trebui să încercați să folosiți alt port USB.
5. Dacă nu puteți obține o imagine la rezoluția 720 x 720 pe niciun port USB, încercați să deconectați dispozitivele USB neesențiale, precum telefoanele mobile, modemurile USB etc.

Observație • Unele dispozitive USB sunt conectate intern și pot fi dezactivate doar prin meniuri, comenzi rapide, butoane, din panoul de comandă sau din managerul de dispozitive.

Pentru utilizatori avansați

Dacă deconectarea dispozitivelor USB nu dă rezultate, încercați să dezactivați dispozitivele USB unul câte unul în managerul de dispozitive până ce apare o imagine.

Observație • Unele dispozitivele rezervă lățime de bandă USB chiar dacă nu sunt utilizate.

Notă privind drepturile de autor

© 2013, 2019 Natus Medical Denmark ApS. Toate drepturile rezervate. ® Otometrics, pictograma Otometrics, AURICAL, MADSEN, Otoscan, ICS și HORTMANN sunt mărci comerciale înregistrate ale Natus Medical Denmark ApS în SUA și/sau în alte țări.

Data de publicare a versiunii

07.03.2019 (209165)

Asistență tehnică

Contactați-vă distribuitorul.