



Maßgeschneiderte Konnektivitäts- und Workflow-Lösungen



HL7-Lösungen von Natus

Natus arbeitet eng mit Kunden zusammen, um Konnektivitätslösungen bereitzustellen, die eine bessere Betreuung der Patienten ermöglichen. Die HL7-kompatiblen Systeme von Natus werden von unserem engagierten Serviceteam in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Personal vor Ort integriert. **Systeme von Natus wurden bereits erfolgreich in Epic, Meditech, Cerner, McKesson und zahlreiche andere Systeme integriert**, um einen optimierten Arbeitsablauf von der Aufnahme der Signale bis zur Erstellung des Abschlussberichts im System des Krankenhauses für elektronische Patientenakten zu ermöglichen.

**CITRIX®
READY**

**vmware®
READY**
APPLICATION
SOFTWARE



Fernüberwachung

Als Citrix® und VMware® Ready-Partner bietet Natus die leistungsfähigste Infrastruktur für die Zusammenarbeit mit Kollegen außerhalb des Standorts durch Fernüberwachung und -auswertung. In der NeuroWorks® und SleepWorks™ Software integrierte Fernüberwachung bietet Ihnen jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Patienten. Fernüberwachung vereinfacht außerdem Konsultationen mit Anwendern vor Ort und außerhalb des Standorts. Natus ist das einzige Unternehmen im Bereich der Neurodiagnostik mit verifiziertem Citrix Ready-Support für externe Anwender. **Die robuste Lösung für den Fernzugriff wird durch Virtualisierungsfunktionen unter Verwendung von VMware weiter verbessert**, wodurch die Kosten gesenkt, die Qualität erhöht und die Bereitstellung der Patientenversorgung optimiert werden können. Mithilfe der Citrix XenApp können Anwender Live- oder Auswertungsuntersuchungen in der VMware vSphere Anwendung aus der Ferne überwachen.


Cybersecurity-Programm

Natus hat ein Cybersecurity-Programm entwickelt, um Merkmale und Funktionen zur Erhöhung der Produktsicherheit in unseren Medizinprodukten zu implementieren. Wir beurteilen unsere Produkte kontinuierlich auf identifizierte Bedrohungen und Schwachstellen der Medizintechnik und überwachen Feedbackkanäle von Aufsichtsbehörden und Kunden, um Sicherheitsereignisse vor Ort zu beheben. **Natus engagiert sich für die proaktive Integration von Sicherheit** in das Design unserer Medizingeräte und die Abwicklung unserer Kundendienstprozesse.



Konformität mit HIPAA-Vorschriften

Natus NeuroWorks- und SleepWorks-Systeme verfügen über XLSecurity, eine leistungsstarke Sicherheitsebene. **Mit Microsoft® Active Directory integrierte Sicherheitsmerkmale und mittels Microsoft BitLocker Verschlüsselung gesicherte Daten.** Benutzer können rollenbasierte Sicherheitsfunktionen zuweisen, die die Konfiguration von einzelnen Benutzern oder Gruppen mit bestimmten Funktionen ermöglichen, sowie automatische Protokollierungs- und Auditfunktionen für Benutzeraktivitäten implementieren. Benutzer können auf einfache Weise gewechselt werden, ohne dass laufende Untersuchungen gestoppt werden müssen.

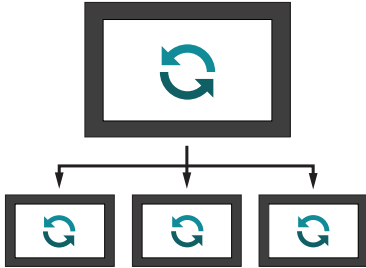

Cerebrum Enterprise Solution

Automatisierter Software-Rollout zur Maximierung der Effizienz

Cerebrum Enterprise Solution ist ein exklusives, innovatives Site-Lizenz-Managementtool zur Automatisierung von Software-Upgrades für Mehrbett-Standorte. Diese automatisierte Softwareimplementierung minimiert menschliche Fehler und Kosten, die bei manuellen Updates auftreten können. **Das Upgrade aller Systeme am Standort erfolgt von einer zentralen Überwachungskonsole aus in weniger als 2 Stunden** anstelle von mehreren Tagen oder sogar Wochen. Dies optimiert die Bettenauslastung und eliminiert lange Ausfallzeiten. Unter Verwendung von Cerebrum kann der Upgrade-Status jeder Softwarestation über Echtzeitberichte an einer zentralen Konsole abgerufen werden.



Testumgebungs-Lösungen speziell für Ihre IT-Anforderungen

Optimieren Sie Ihre Produktivität mit IT-orientierten Testkonfigurationen von Natus. Diese dedizierten Konfigurationen ermöglichen Ihnen das Testen und Verifizieren der Vernetzung, des Workflows, der Berichterstellung und anderer Aspekte im Zusammenhang mit dem Hinzufügen von Natus-Geräten zum Krankenhaussystem.

Eine Sandbox-Umgebung für Daten- und Citrix-Server, die dem IT-Personal das Testen des Rollouts neuer Software oder Upgrades der Server-Infrastruktur ermöglicht.

IT-SERVER-DEMO-KIT NeuroWorks 9.x Datenserver-Software und Citrix-Software

Typische Aufnahmekonfigurationen, die eine Testumgebung zum Testen des Netzwerkverkehrs und zum Rollout neuer Software-Upgrades oder Updates der Krankenhaus-Infrastruktur (z. B. Antivirus-Software) bereitstellen.

IT-EMU40-ACQ NeuroWorks/SleepWorks-Demoaufnahme mit EMU40EX-Verstärker, PC, Bildschirm, Kamera und Wandschnellanschluss

IT-BM-ACQ NeuroWorks/SleepWorks-Demoaufnahme mit Natus Brain Monitor-Verstärker, PC, Bildschirm, Kamera und Wandschnellanschluss

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Kunden in den USA wenden sich an die folgende Nummer: **+1-800-356-0007**

Internationale Kunden wenden sich an die folgende Nummer: **+1-608-829-8500**

Medizinische Lösungen mit nur einem Fokus: den Patienten!

©2020 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben. **Teilenummer 025449D**

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com