



## 最好的材料、可靠的设计、 精密的工艺

重型 24k 金板超纯银铸造杯



坚固的纯银铸造杯，经抛光处理，  
表面光滑



重型 24k 金板超纯银



- 每个 Genuine Grass 都经过机械和电气性能测试，以确保长寿命... 并享有一年\*质保
- 无与伦比的录制清晰度和可靠性
- 可选择直径 10mm 的深金属铸造杯或金色或银色或直径 6mm 的金铸杯
- 可选择三种独特的多功能 1.5mm 防触摸接头
- 可选择轻质或无缠结的导线；两者都包括 Kevlar® 股线以增加强度
- 可采用蒸汽和 EtO 消毒

在阀杆上钻孔允许完整的导线插入，以实现最佳的电气和机械连接。双倍减轻应力实现了高耐用性并防止液体侵入以保持纯度。

\*一年保修仅适用于标有“Genuine Grass”的精选产品

## 技术规格

项目编号	杯类型	电线长度和类型	连接器类型	数量
F-E5GH-12	10mm 金 w/2mm 孔	12" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-24	10mm 金 w/2mm 孔	24" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-30	10mm 金 w/2mm 孔	30" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-60	10mm 金 w/2mm 孔	60" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-72	10mm 金 w/2mm 孔	72" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-96	10mm 金 w/2mm 孔	96" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5GH-120	10mm 金 w/2mm 孔	120" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E6GH-48	6mm 金 w/1.5mm 孔	48" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5SH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
F-E5SH-72	10mm 金 w/2mm 孔	72" 轻量特氟龙	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FH-E5GH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 轻量特氟龙	手工 1.5mm 防触摸	10/盒
FH-E5GH-60	10mm 金 w/2mm 孔	60" 轻量特氟龙	手工 1.5mm 防触摸	10/盒
FH-E5GH-72	10mm 金 w/2mm 孔	72" 轻量特氟龙	手工 1.5mm 防触摸	10/盒
FH-E5GH-96	10mm 金 w/2mm 孔	96" 轻量特氟龙	手工 1.5mm 防触摸	10/盒
FH-E5SH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 轻量特氟龙	手工 1.5mm 防触摸	10/盒
FD-E5GH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 轻量特氟龙	超宽 1.5mm 防触摸	10/盒
FD-E5GH-60	10mm 金 w/2mm 孔	60" 轻量特氟龙	超宽 1.5mm 防触摸	10/盒
FD-E5GH-72	10mm 金 w/2mm 孔	72" 轻量特氟龙	超宽 1.5mm 防触摸	10/盒
FD-E5GH-96	10mm 金 w/2mm 孔	96" 轻量特氟龙	超宽 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5GH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5GH-60	10mm 金 w/2mm 孔	60" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5GH-72	10mm 金 w/2mm 孔	72" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5GH-96	10mm 金 w/2mm 孔	96" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5GH-120	10mm 金 w/2mm 孔	120" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5SH-48	10mm 金 w/2mm 孔	48" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒
FS-E5SH-60	10mm 金 w/2mm 孔	60" 无缠结硅胶	模塑 1.5mm 防触摸	10/盒

十种导线颜色：棕色、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、灰色、白色、褐色

### 材料

#### 电极


金板 ..... 重型 24k 金板超纯银，经过抛光处理，表面光滑  
 银杯 ..... 纯银，经过抛光处理，表面光滑

#### 导线

导体  
 符合标准、无扭结的 7 股镀银铜合金，带有 Kevlar 芯，以增加强度  
 绝缘  
 高弹性特氟龙 (F、FH、FD 系列) 或极其柔软的无缠结硅胶 (FS 系列)  
 聚烯烃热缩管，防止液体侵入

#### 防触摸接头，1.5mm (DIN 42 802)

接头 ..... 铜合金本体，不锈钢套管  
 绝缘材料 Pelprene 热塑性树脂 (F、FS 系列)；聚烯烃 (FH、FD 系列)  
 不含乳胶 / 符合 RoHS 要求

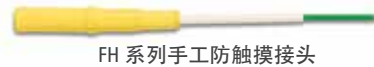

FH 系列手工防触摸接头



FD 系列超宽防触摸接头



F 和 FS 系列模塑防触摸接头

### 耗材

Natus 提供全面的神经诊断用品，特点是：

- 专门的和知识渊博的客户服务团队
- 订购流程简化
- 在线订购非常方便 (仅限美国客户)

[Natus Medical Store – natusmedicalstore.com](http://NatusMedicalStore-natusmedicalstore.com)

### 不忘初心的医疗保健解决方案。一切为了您。

©2020 Natus Medical Incorporated 版权所有。保留所有权利。本档上出现的所有产品名称均为 Natus Medical Incorporated 及其子公司或关系企业所有、获授权使用、宣传或发布的商标或注册商标。 027122B

要了解有关 Natus 产品的更多信息，请联系您当地的经销商或销售代表。

美国客户请致电：1-800-356-0007

国际客户请致电：+1-608-829-8500

**natus**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)