



EEG d'excellente qualité
dans un système fiable

Solutions d'EEG

Une solution puissante équipée de nombreuses fonctionnalités dynamiques qui offrent les outils dont vous avez besoin dans tous les environnements, tels que laboratoires d'EEG, blocs opératoires, salles d'urgence ou cliniques privées.

Performance fiable – Qualité de signal exceptionnelle avec taux d'échantillonnage élevés et vidéo HD

Configuration flexible – Amplificateurs et caméras TCP/IP vrai compatibles DHCP qui se branchent n'importe où sur le réseau

Mobilité et confort patient améliorés – Amplificateurs petits, légers et facilement portés par le patient

Sécurité et conformité HIPAA – Progiciel XLSecurity basé sur les rôles des utilisateurs et conforme à la réglementation HIPAA avec intégration d'Active Directory et cryptage

Logiciel NeuroWorks de Natus

Logiciel de pointe offrant un vaste ensemble de fonctionnalités flexibles pour toute une variété d'environnements

Logiciel sophistiqué pour une expérience clinique intuitive


- Compatibilité avec Windows® 10
- Plusieurs options d'analyse des pics et des événements, ainsi que de nombreuses options de tendances avancées supplémentaires
- Récupération automatisée des données pendant l'utilisation de l'électrocautère dans le bloc opératoire
- Caméras réseau entièrement synchronisées, faciles à configurer, Full HD (1080p) TCP/IP PTZ
- Partage des données dans des environnements multi-sites

Des fonctions d'administrateur qui font gagner du temps

- Configuration facile avec les caméras et amplificateurs à flux IP
- Détection automatique des amplificateurs et caméras
- Synchronisation automatisée des paramètres sur l'ensemble des postes de travail NeuroWorks connectés au réseau

Sécurité et tranquillité d'esprit pour les informaticiens et cliniciens qui travaillent en équipe

- Couche XLSecurity avec sécurité basée sur les rôles des utilisateurs et cryptage des lecteurs
- Base de données puissante et consultable, distribuée par serveur SQL d'entreprise
- Intégration HL7 bidirectionnelle avec les divers systèmes d'information hospitaliers
- Installation logicielle automatisée pour les grands sites avec Cerebrum Enterprise Solution

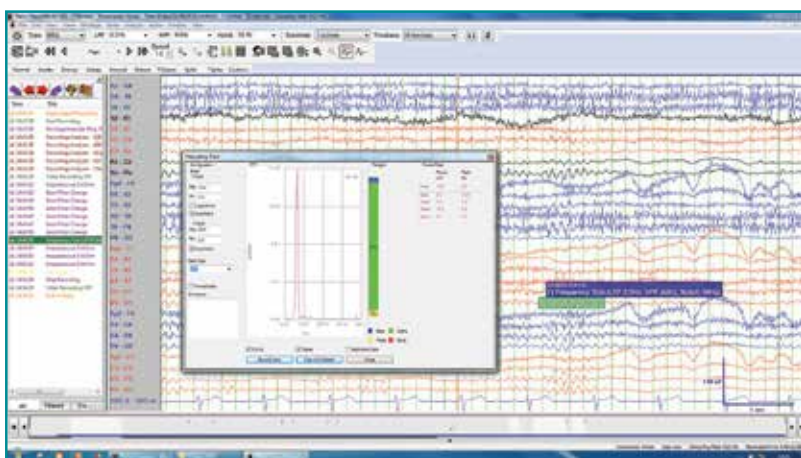

Outil d'analyse de fréquence

- Permet de faire glisser la zone d'intérêt
- Permet d'identifier rapidement la fréquence, l'amplitude et la puissance des données sélectionnées
- Permet d'afficher le pourcentage de chaque plage de fréquences



Programme de cybersécurité Natus

La cybersécurité est gérée proactivement en tant que partie intégrante de notre processus de conception

- Manipulation sécurisée des informations confidentielles générées ou maintenues par notre matériel et logiciel
- Évaluation continue de nos produits pour contrer les menaces et faiblesses identifiées
- Surveillance des retours d'information pour gérer les événements de sécurité sur le terrain

Matériel d'EEG NeuroWorks de Natus

Amplificateurs durables, fiables et de haute qualité pour une acquisition fidèle des données



EEG32U

Amplificateur simple conçu pour les études d'EEG de routine

- Amplificateur à 32 canaux
- Taux d'échantillonnage jusqu'à 1024 Hz
- Vérification intégrée de l'impédance
- Schéma de tête 10-20 avec voyants DEL indicateurs d'impédance
- Un seul câble USB standard reliant le PC à l'amplificateur pour la transmission des données et pour l'alimentation



Natus Brain Monitor*

Amplificateur versatile qui offre différentes options de test

- 64 canaux référentiels, 16 canaux CC
- Taux d'échantillonnage de 4 kHz
- Oxymètre de pouls intégré
- Écran tactile sur l'unité de base permettant l'interaction en temps réel avec les études en cours
- Vérification visuelle de l'impédance et ajout de notes
- Permet d'effectuer des bio-étalonnages au chevet du patient

*nécessite NeuroWorks version 9.0 ou ultérieure



Stimulateur photique à DEL Natus

- Élimine les interférences acoustiques et électriques
- Séquences photiques personnalisées
- Séries photiques faciles à démarrer ou à arrêter

Sécurité des données

Configuration de l'accès et des permissions des utilisateurs, individuellement ou en groupe, pour le système et dans l'application. Attribution de règles de verrouillage différentes à différents ordinateurs sur un même réseau. Accès aux listes de contrôle pour consulter l'activité des utilisateurs sur le système. Sécurité intégrée avec Microsoft® Active Directory et tranquillité d'esprit grâce au cryptage du système.

Consommables pour EEG

Pratiques, complets, fiables

Natus prend en charge toute la gamme des soins des patients qui sont sous surveillance EEG, offrant un portefeuille complet de consommables d'EEG, le tout dans une solution entièrement intégrée.

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)

Natus Medical Store – www.natusneurostore.com.



Service

Chez Natus, nous visons l'excellence, tant dans nos relations clients que pour notre service technique.

Voici ce que nous vous proposons :

- Assistance technique accessible et efficace
- Documentation technique exhaustive et équipes d'installation expertes
- Option de garantie prolongée et programmes de couverture des services
- Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Donner un sens aux signaux du corps

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 025453 Rev03



Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+33-5-56-08-54-76**

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com