



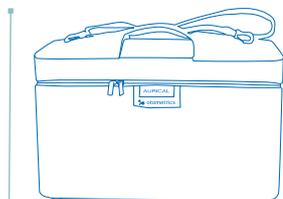

Sur la route d'une  
excellente adaptation

# Caisson acoustique

Encombrement minimum. Avantages maximum

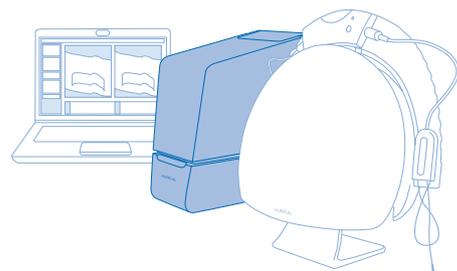

**Portable:** sa conception compacte vous permet de l'emporter pour des visites à domicile ou de changer facilement de lieu d'installation.

**Unique:** associe un faible encombrement avec un ensemble complet de fonctions et une facilité d'emploi pour l'appareillage au coupleur grâce au RECD et pour la réalisation de mesures personnalisées.



**Les aides auditives** s'installent facilement et correctement pour des mesures fiables et précises. La méthode **OnePosition** s'accorde avec toutes les mesures.



Aurical HIT incarne une approche différente des tests des aides auditives. Son concept vertical lui confère un faible encombrement assorti d'une vaste gamme de fonctions et l'atout de la portabilité. Aurical HIT vous permet de réaliser un appareillage au coupleur intuitif utilisant le RECD, la pré-programmation et le pré-appareillage étant possibles sans le client. Aurical HIT peut fonctionner indépendamment des autres éléments Aurical. Vous pouvez également le brancher à l'Aurical Aud ou directement et simplement à votre ordinateur équipé d'Otosuite® – l'interface partagée par tous les éléments de l'Aurical.

Aurical HIT offre une souplesse exceptionnelle afin que vous puissiez adapter les aides auditives comme vous le souhaitez. Mesurez conformément aux normes IEC et ANSI ou effectuez des mesures FreeStyle. Personnalisez les stimuli et les cibles prescrites selon vos besoins. Les tests utilisateurs dans Otosuite vous autorisent des tests partiels et/ou complets pour la cohérence, la facilité d'utilisation et plus d'efficacité.

Aurical HIT fournit une image fidèle de chaque aide auditive indépendamment de son fabricant ou de son type. C'est parfait pour la vérification des fonctions sans fil.

## LES FAITS

- L'appareillage avec la méthode RECD s'effectue selon les règles d'adaptation DSL v5.0 et NAL NL2
- Pour patients adultes et pédiatriques
- Test d'aide auditives (HIT) conforme aux normes IEC et ANSI ou personnalisé selon vos besoins
- Vérification de la technologie sans fil
- Test de la directionnalité
- Stimuli 2 voies dans PMM FreeStyle
- Stimuli et cibles personnalisés
- Interface Otosuite
- Alimentation USB
- OnePosition
- Adaptateurs du coupleur HA1 ou HA2 clipsables
- Détection automatique de la pile bouton utilisée
- Boucles magnétiques intégrées

# Concept OnePosition unique


Facile à utiliser. Excellente qualité



Jusqu'à présent, les tests des aides auditives étaient source de tracas et utilisaient un processus de travail haché. C'est pourquoi nous avons créé le concept **OnePosition**.

OnePosition est une méthode unique qui associe facilité d'emploi avec précision et qualité. En bref, OnePosition consiste à placer rapidement et facilement l'aide auditive dans l'emplacement sécurisé du caisson acoustique, sans avoir à la déplacer pour les mesures de directionnalité et d'induction. En outre, tous les modèles d'aide auditive sont pris en charge, y compris les solutions FM. La conception d'Aurical HIT cherche à éliminer toutes les étapes traditionnelles de test de l'aide auditive ou d'appareillage basé sur coupleur, ou du moins à les faciliter.


En voici quelques exemples : la boîte d'accessoires sert de support pour les adaptateurs du coupleur et vous permet

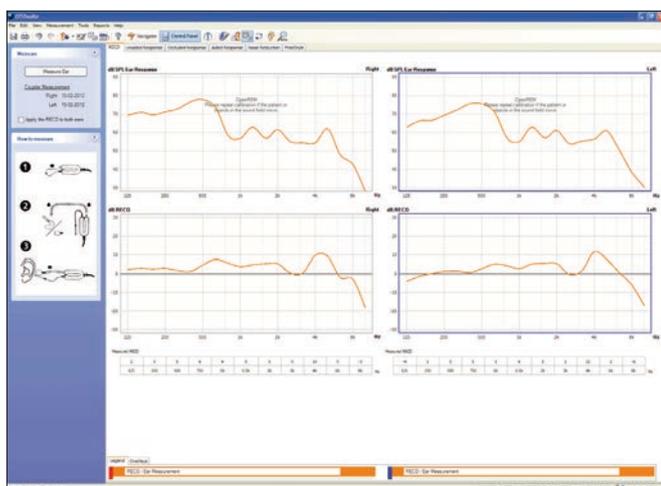

Fonctionnement RECD intuitif dans Otosuite.

de connecter l'aide auditive à l'adaptateur. Cet adaptateur s'enclenche facilement sur le coupleur intégré et le microphone, connecté sans effort dans un logement dédié qui garantit la hauteur correcte de l'aide auditive pour toutes les mesures. Le microphone de référence col-de-cygne est facile à positionner et reste fermement en place. Les câblages sont virtuellement éliminés, de même que les coupleurs qui bougent dans le caisson acoustique. Les boucles d'induction intégrées offrent un champ magnétique très homogène, de sorte qu'il est désormais inutile de réorienter l'aide auditive en direction de ce point d'écoute optimal avant d'effectuer la mesure.

C'est le principe de OnePosition : la qualité dans toute sa simplicité. Aurical HIT a été créé pour s'adapter à votre façon de travailler, et non l'inverse.

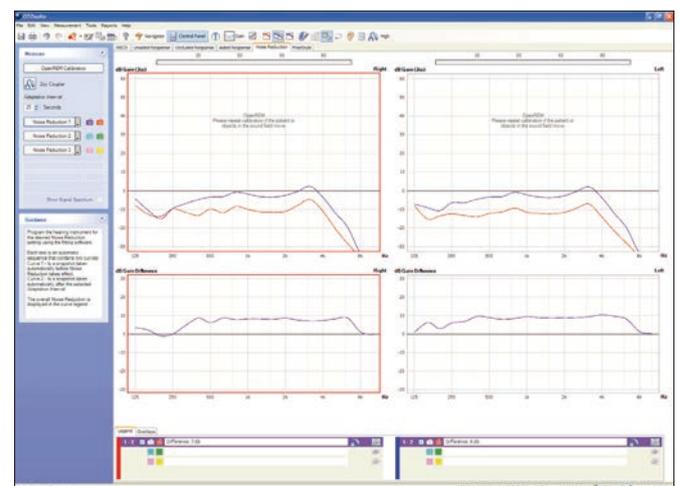

Démonstration des fonctionnalités avancées de l'aide auditive.

Regardez la vidéo consacrée au concept unique OnePosition sur [hearing-balance.natus.com/aurical](http://hearing-balance.natus.com/aurical)

## La gamme Aurical

Entièrement intégré dans Otosuite



Le logiciel Otosuite® intègre tous les éléments d'Aurical®. Il est intuitif, simple et facile à utiliser. Il prend en charge l'ensemble du parcours client, en passant par les conseils, l'appareillage et le contrôle. L'ergonomie intuitive des tests utilisateur se traduit par des flux de travail configurables, homogènes et réguliers qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins. Tous les modules utilisent la même interface logiciel. Le vécu de l'appareillage s'en trouvera encore optimisé, pour vous et votre client.

**Pour regarder les vidéos consacrées à la solution d'appareillage complète, veuillez visiter le site [hearing-balance.natus.com/aurical](https://hearing-balance.natus.com/aurical)**

### À propos de Natus

Leader dans les produits et solutions pour l'audition et l'équilibre, Otometrics a été acquise en 2017 et opère désormais sous le nom de Natus. Depuis près de 60 ans, nous aidons les professionnels de santé à améliorer la qualité de vie de leurs clients et patients en leur fournissant des connaissances d'experts, des solutions, des services fiables et des partenariats de confiance. Nous continuons à développer, fabriquer et commercialiser des instruments audiolinguistiques, otoneurologiques et vestibulaires dans plus de 80 pays sous des marques de confiance, notamment Madsen®, Aurical®, ICS®, Otoscan® et Bio-logic®. Natus Medical Incorporated est la marque mondiale dont dépendent les professionnels de santé pour diagnostiquer et traiter les troubles des systèmes nerveux central et sensoriel afin d'améliorer les résultats pour les patients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site à l'adresse [natus.com](https://natus.com).

**Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !**

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits apparaissant sur ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues, concédées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 7-26-8091-FR Rev03

**natus**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://natus.com)